

CASCADE Flexible Scaler

Strisce forate in acciaio inox




- Toglie il tartaro e la placca presente negli spazi interdentali, grazie ai rilievi micrometrici taglienti di ogni foro.
- Flexible Scaler si presenta in rotolo di acciaio inossidabile da 2 metri.
- Sterilizzabile: può essere riutilizzato più volte.



Stato della superficie dello smalto dopo l'utilizzo di diversi sistemi di detartraggio interdentale.





Cascade Flexible Scaler
per 10 secondi.

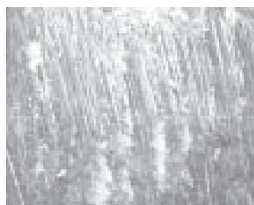

Strip silicate
per 3 secondi.

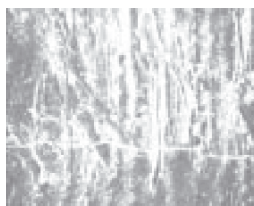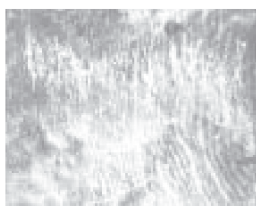

Strip diamantate
per 3 secondi.

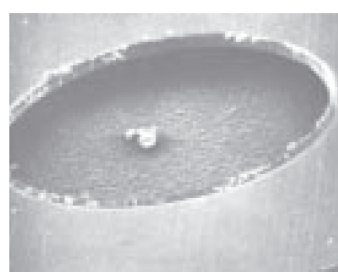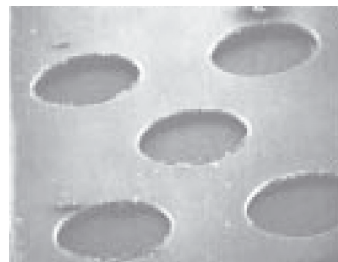

Due fotografie al microscopio elettronico che mostrano i rilievi micrometrici dei fori. Grazie a questa particolare tecnologia, Flexible Scaler pulisce e lucida senza danneggiare lo smalto.

Istruzioni:

Tagliare una striscia di 10 cm. circa, e tenerla tra il pollice e l'indice. Mettere il lato con i leggeri rilievi sulla parte del dente da trattare e pulire con un movimento avanti-indietro.

Confezione:

Flexible Scaler è in rotolo da 2 m di acciaio inossidabile.